


**Давайте
начнем**




Познакомьтесь с новым Venom 2

Вид сверху:

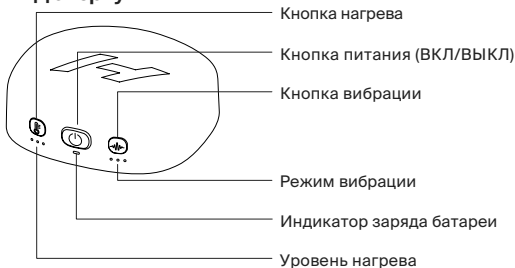

Вид снизу:

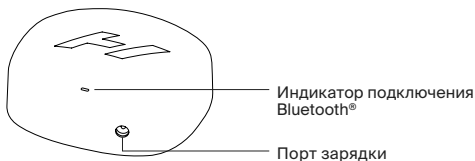

Перед началом работы

Скачайте приложение Hyperice

Получите максимум от Venom 2 и других устройств Hyperice с помощью приложения Hyperice.

- Управляйте сессиями дистанционно, включая и выключая их автоматически.
- Контролируйте нагрев и вибрацию прямо из приложения.
- Просто откройте приложение — подключение к устройству произойдет автоматически.

Индикатор Bluetooth® загорится при успешном подключении.



Зарегистрируйте свое устройство

Активируйте гарантию и получите доступ к простому возврату, ремонту или замене на hyperice.com/register-product.



Модели Venom 2:

Спина (V20001)

Нога (V20002)


Правое плечо (V20003)

Левое плечо (V20004)

Зарядка нового Venom 2

Подключите Venom 2 к комплектному зарядному устройству Hyperice.


Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор (до шести часов).

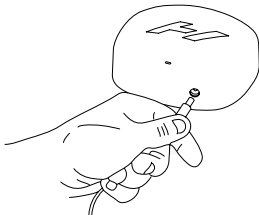

Начало работы

Включение устройства

Нажмите кнопку включения/выключения (ON/OFF), чтобы включить Venom 2.

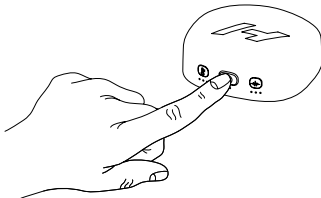


Перед первым использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Регулировка температуры

Выберите нужный уровень нагрева, нажимая кнопку нагрева.

Белые индикаторы под кнопкой укажут уровень (1-3).

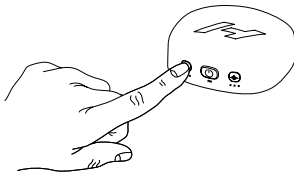

Добавление вибрации

Выберите подходящий режим вибрации, нажимая кнопку вибрации.

Белые индикаторы под кнопкой отобразят выбранный узор вибрации.




Как надевать Venom 2

Venom 2 можно использовать: на голую кожу (только уровень 1), поверх легкой и удобной одежды (все уровни). Разместите бандаж на нужном участке тела и надежно зафиксируйте. Убедитесь, что контрольный блок доступен и ткань не собирается складками.

Зарядка аккумулятора

Полная зарядка обозначается непрерывным зеленым светом индикатора батареи. Используйте только оригинальное зарядное устройство Huperice.

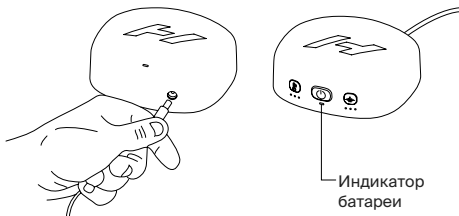

Уход за Venom 2

- Убедитесь, что устройство выключено и не подключено к зарядному устройству.
- Используйте чистую, влажную ткань для аккуратной очистки контрольного блока и компрессионного биндажа.
- Храните в чистом, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

