


**Давайте
начнем**



Познакомьтесь с Venom Go


Вид спереди

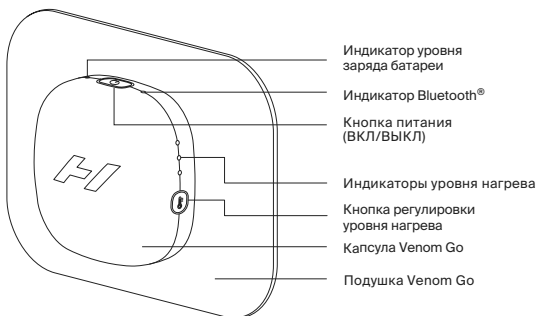

Индикаторы режима
вибрации Vibration


Кнопка выбора
режима вибрации

Порт для зарядки

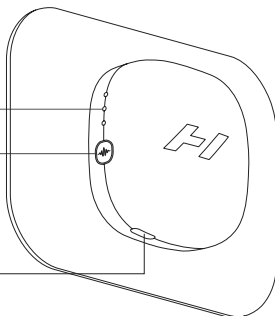

Вид сзади

Магнитное крепление

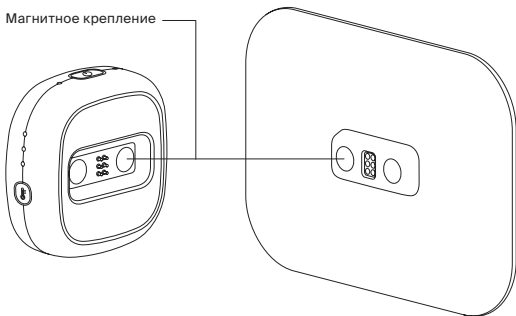


Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

Перед началом использования

Загрузите приложение Hyperice

Используйте приложение Hyperice, чтобы получить максимум от Venom Go или любого другого устройства Hyperice. Управляйте сеансами, регулируйте нагрев и вибрацию дистанционно.

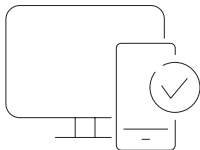


Зарегистрируйте устройство

Активируйте гарантию и обеспечьте легкий возврат, ремонт или компенсацию на сайте:
hyperice.com/register-product

Зарядите свой новый Venom Go


Подключите Venom Go к зарядке с помощью комплектного Hyperice USB-C кабеля и дождитесь полной зарядки.

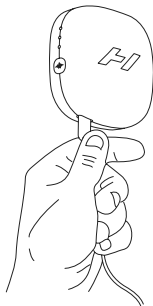

Начало сеанса

Включение устройства


Нажмите кнопку питания (вверху) один раз, чтобы включить Venom Go.

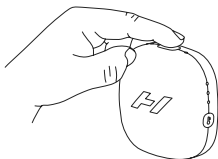

Применение накладки и подключение модуля

Отклейте накладку Venom Go от защитной подложки и прикрепите к коже. Выберите уровень нагрева и вибрационный режим. Подключите модуль с помощью магнитного соединения (показано ниже / справа).

Важно: Нагрев и вибрация начнут ощущаться только после подключения модуля.

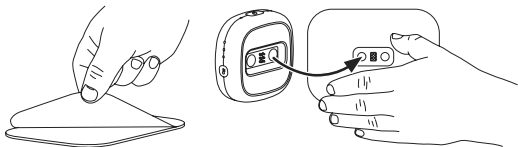


ВНИМАНИЕ! Используйте только на чистой и сухой коже.

Не используйте при потоотделении. Не выбрасывайте защитную подложку для накладки. После использования снова прикрепите накладку к подложке и храните в прохладном, сухом месте.

Регулировка температуры

Выберите желаемую температуру, нажимая кнопку регулировки нагрева (справа) один раз для каждого уровня. Белые индикаторы отобразят выбранный уровень температуры.

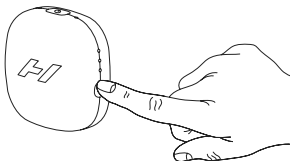


Добавление вибрации


Выберите режим вибрации, нажимая кнопку выбора вибрационного паттерна (слева) один раз для каждого режима. Белые индикаторы отобразят выбранный режим вибрации.



Наслаждайтесь сеансом

Почувствуйте расслабляющее действие Venom Go. Сеанс автоматически завершится через 10 минут. При необходимости перезапустите устройство.

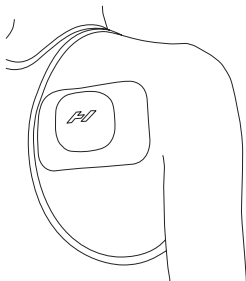

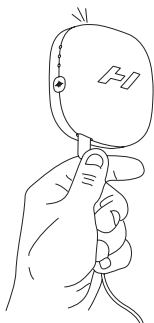

Зарядка устройства

Полная зарядка завершается, когда индикатор заряда на модуле светится зелёным и остаётся полностью подсвеченным.

Уход за Venom Go

- Убедитесь, что устройство выключено, а зарядное устройство не подключено.
- Протрите модуль и накладку (если необходимо) чистой, влажной тканью.
- После использования прикрепите накладку обратно к защитной подложке.
- Храните в прохладном, сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Утилизируйте накладку, если она больше не держится на коже. Дополнительные наклейки можно приобрести на hyperice.ru

