

УХОД И ГАРАНТИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

• Если в течение 2 месяцев на вашем рту или деснах была проведена операция, проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием.

• Если в вашем организме имеется модулятор сердечного ритма или другое устройство, перед использованием проконсультируйтесь со своим стоматологом или производителем.

• Не используйте насадку щетки, не рекомендованную компанией.

• Этот продукт используется только для чистки зубов и десен. Не используйте для других целей. Этот продукт не подходит для детей, младенцев.

• Пожалуйста, размещайте места, где дети и младенцы не подвергаются воздействию. Не используйте игрушки.

• Чтобы эффективно предотвратить рост бактерий в щетине щетки и защитить здоровье полости рта, рекомендуется заменять насадку щетки каждые три месяца.

• Когда щетинки явно разбросаны, также рекомендуется заменить насадку щетки.

⊘ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• При наличии видимых повреждений не используйте его.

• Этот продукт содержит перезаряжаемую батарею. Не подвергайте его воздействию огня или тепла и не используйте при высокой температуре.

• Запрещается ломать, модифицировать, разбирать или ремонтировать его.

• Пожалуйста, заряжайте при температуре 0 C-40 C.

• Прежде чем использовать батарею, ее необходимо извлечь из изделия.


• При вынимании аккумулятора он должен быть выключен.

• С аккумулятором следует обращаться безопасно.


Примечание. При использовании электрической зубной щетки здоровье зубы могут испытывать жжение или незначительное кровотечение. Это происходит потому, что десны не привыкли к стимуляции. Это прекратится в течение 1-2 недель. Если прошло более 2 недель, прекратите использование и проконсультируйтесь со своим стоматологом.

ИНСТРУКЦИЯ


- 1 Вставьте насадку щетки вертикально в корпус. Между насадкой и корпусом примерно 1 мм расстояния, что является нормой.

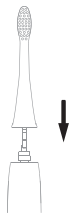

- 2 Намочите щетку и разместите зубную пасту .

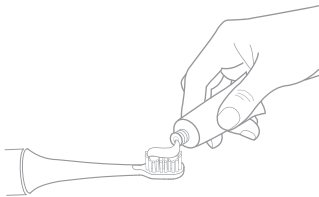


- 3 Аккуратно поместите насадку щетки на стык зубов и десен.

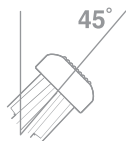


ИНСТРУКЦИЯ


- 4 Нажмите многофункциональную кнопку, выберите режим чистки, и начните чистить зубы.

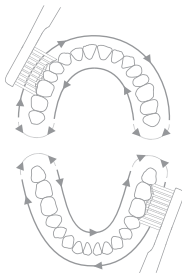

- 5 Щетка автоматически выключится после двух минут использования. Каждые 30 секунд будет пауза, чтобы вы могли перенести щетку в другую зону.

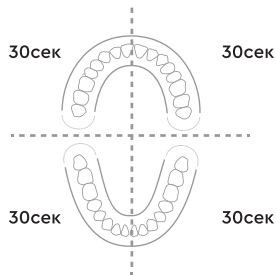

- 6 Вымойте зубную щетку под проточной водой и встряхните от лишней жидкости.

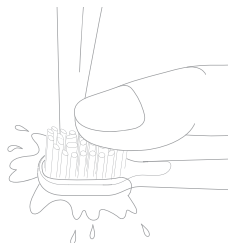

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

• При обычном использовании индикатор зарядки постоянно горит. Когда аккумулятор разряжен, индикатор зарядки мигает. (Подсказка о необходимости подзарядки) Если аккумулятор не заряжен, индикатор будет продолжать мигать, пока не погаснет. Индикатор зарядки мигает во время зарядки, когда он полон электричества.

• Во время зарядки индикатор питания горит красным. Когда индикатор загорится зеленым, аккумулятор полностью заряжен. Пожалуйста , отключите вилку питания вовремя

• Во избежание опасности всегда заряжайте изделие с помощью оригинального стандартного зарядного устройства. После завершения зарядки извлеките зарядное устройство, чтобы избежать перегрева и старения компонентов , что может привести к поломке зарядного устройства, поражению электрическим током и другим проблемам.

• Прежде чем подключать зарядное устройство к источнику питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли стандартное напряжение продукта напряжению местной электросети

ГАРАНТИЯ

• В течение одного года с даты покупки вы будете иметь право на бесплатное гарантийное обслуживание, если наш авторизованный сервисный персонал подтвердит вам, что проблемы с качеством продукции вызваны производственным процессом или факторами компонентов.

• Гарантия распространяется на основной корпус электрической зубной щетки, соответствующее зарядное устройство и т. д. (не включая насадки щетки и другие расходные материалы).

Следующие условия не покрываются гарантией на продукт:

• Повреждение продукта из-за неправильного использования или отсутствия надлежащего ухода, например, в результате антропогенного уничтожения и т. д.

• Повреждения, возникшие в результате сноса и ремонта данного продукта, не подлежат авторизованному сервисному персоналу.

• Нет действующей гарантийной карты или действующего счета-фактуры на покупку.

Количество пульсаций – 41000

Питание – от аккумулятора

Потребляемая мощность – 5 Вт

Время зарядки – 4 ч

Вес – 80 грамм

Режимы – деликатная чистка, ежедневная чистка, массаж, отбеливание, чистка языка