

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Меры предосторожности

⚠ Опасно!

- При первом использовании этого продукта некоторые люди ощущают раздражение или онемение зубов, что является нормальным. Если вышеуказанная ситуация сохраняется после двух недель непрерывного использования, прекратите использование этого продукта и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Непрофессионалам запрещено самостоятельно разбирать данное изделие. Если вам необходимо заменить батарею, обратитесь в центр послепродажного обслуживания, авторизованный Kopka.

3. Пожалуйста, не заряжайте в ванной, не ставьте зарядное устройство над или рядом с водонагревательным устройством (например, ванна, бассейн и т. д.).

4. Если вы обнаружите, что шнур питания поврежден, во избежание опасности немедленно отключите прибор (зарядное устройство).

5. Запрещается использовать зарядную базу продукта в условиях высокой температуры или воздействия солнечных лучей, а продукт необходимо заряжать вдали от сильного электрического магнитного поля (например, индукционной плиты).

📌 Заметка!

- При использовании этого продукта вы можете использовать только специальную насадку Kopka и специальное зарядное устройство, прилагаемое к этому продукту.
- Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Пожалуйста, не используйте его для каких-либо других целей.
- Этот продукт является частным и не может использоваться несколькими пациентами в стоматологических клиниках или других учреждениях.
- Чтобы обеспечить безопасность при использовании этого продукта, следующие группы людей: дети, люди с психическими или сенсорными нарушениями, отсутствием соответствующего опыта и знаний, должны использовать этот продукт под присмотром или руководством кого-либо

Меры предосторожности


⚠ Напоминание!

- Следующие пациенты запрещено использовать этот продукт или после консультации со стоматологом.
 - Те, кто перенес пероральную или пародонтальную оперативное вмешательство в течение 2 месяцев, а также тем, кто находится на лечении;
 - Те, у кого есть слабые зубные протезы или постоянная кровоточивость десен);
 - Те, у кого есть другие чувствительные и уязвимые проблемы полости рта.
- Не допускайте контакта средств по уходу за волосами (таких как гель, масло) или дезинфицирующего средства для рук с этим продуктом во время использования, чтобы не повредить поверхность продукта.

3. Когда зарядное устройство не нуждается в работе или перед очисткой, обязательно отключите питание. Необходимо регулярно чистить вилку питания, чтобы скопление пыли и грязи не влияло на электропроводность.

4. Прежде чем утилизировать основной корпус зубной щетки, следует извлечь батарею перед обработкой окружающей среды.


Комплектация

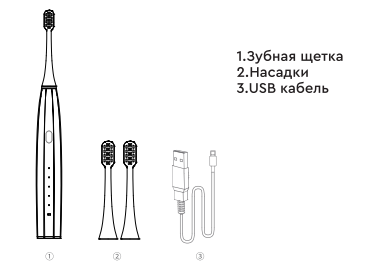


- Зубная щетка
- Насадки
- USB кабель

Как использовать

Рекомендуется чистить зубы: рекомендуется чистить зубы 2 раза продолжительностью не менее 2 минут каждый раз. Освоение правил чистки зубов полезно для здоровья полости рта.

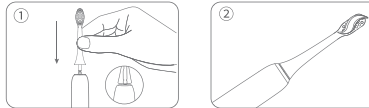


Вам необходимо вставить насадку в головку щетки в правильном направлении, и между корпусом и головкой щетки должен быть зазор.

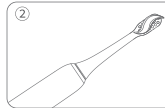


Не включайте, выдавите зубную пасту в щетку на головку, поместите ее в приемную полость. Нанесите зубную пасту на зубы и включите. После снова запустите зубную щетку.

Как использовать

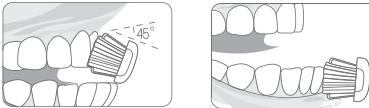

Зубная щетка мягко и с надлежащей силой прижимается к зубам. Угол 45 градусов подходящий, круговые движения медленные.

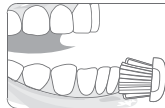

После чистки зубов необходимо полоскать горло, зубную щетку нужно прополоскать и высушить естественным путем.

Слегка приложите его к зубам, не прилагайте слишком много усилий. Электрическая зубная щетка может генерировать ультразвуковую волну, чистя волосы высокочастотной вибрацией для достижения эффекта очистки, но сила может помешать расчесыванию волос для достижения очистки.

Уход



Очистите головку щетки

- После каждого использования очищайте насадку щетки и щетину и сушите их естественным путем.
- Пожалуйста, не тяните щетину, потому что она легко деформируется и может привести к падению щетины.



Очистите основной корпус зубной щетки.

- Вам необходимо протереть его мягкой тканью и высушить естественным путем. Не погружайте основной корпус зубной щетки в воду на длительное время.
- Пожалуйста, не используйте для очистки воду с температурой более 40° или кислотную чистящую жидкость.



Очистите зарядную базу

- Протрите пятна на зарядной базе мягкой тканью. 2. Пожалуйста, отключите источник питания перед очисткой зарядной базы, чтобы избежать поражения электрическим током.



Замените головку щетки


- Рекомендуется заменять насадку щетки каждые три месяца.

Примечание: при регулярном обслуживании можно продлить срок службы батареи.

Зарядка

- Пожалуйста, включите зубную щетку, прежде чем использовать ее в первый раз. Если вы столкнулись с низким уровнем энергопотребления или его отсутствием, используйте его, когда он заполнен. Позже зарядку можно использовать с зарядкой
- Если вы не использовали его более 6 месяцев, зарядите его в соответствии с требованиями к зарядке купленной модели зубной щетки, пока он не заполнится. Пожалуйста, смотрите схему зарядки при зарядке.
- Если индикатор зарядки горит красным во время использования, это означает, что мощности зубной щетки недостаточно. Достаточно, пожалуйста, заряжайте вовремя.
- Когда основной корпус заряжен, индикатор зарядки всегда горит, а красный свет указывает на то, что он заряжается. Световой индикатор горит зеленым, указывая на то, что мощность полная.
- Основной корпус заряжен, красный индикатор дыхания указывает на зарядку, а зеленый длинный свет индикатора указывает на то, что количество электроэнергии заполнено.
- Если электрическая зубная щетка не заряжалась в течение длительного времени, индикатор загорается через 6-10 минут после подзарядки — это нормально.

Схема зарядки:

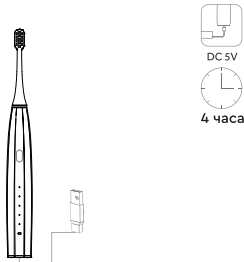

Примечание: безопасная зарядка так же может продлить срок службы.

Функционал

1. Старт/Стоп

Кратковременно нажмите кнопку на корпусе, чтобы включить, и нажмите и удерживайте кнопку на корпусе, чтобы выключить.

2. Переключение режима

Пять режимов чистки: включите зубную щетку и кратковременно нажмите кнопку на корпусе. Передачу можно изменить.

3. Функция памяти

После запуска зубной щетки она автоматически считывает инструкции после последней чистки зубов, которые можно запомнить

Функционал



Режимы

Пять режимов уборки и 15 передач.

Режим чистки 1-й и 3-й передач: (36000 раз/мин. Высокочастотная мощность звуковой волны, вырывает большое количество крошечных пузырьки и вода, оказывающие сильное воздействие. Сила атаки, легко устраняется.
2 и 3 передачи – сильный режим (41000 об/мин) Высокочастотная ритмичная вибрация, сильная акустическая частота эффективно удаляют поверхность зубов, все виды пятен на зубах и придают вашим зубам новый вид.
3. Чувствительный режим 3-й передачи (31000 раз/мин) . Для людей с чувствительными зубами он может удовлетворить потребности пародонта, чувствительность и обеспечить здоровые полости рта.
4. 3-я передача – отбеливающий режим (38000 раз/мин) Высокочастотная ритмичная вибрация может эффективно удалить пятна от кофе, чая и дыма. Модели предназначены для людей с более высокими потребностями.
5. 3-я передача-режим преобразования частоты (31000-41000 раз/мин попеременное изменение) Умное преобразование частоты скачка, от слабого к сильному, подходит для интенсивного волнового массажа зубов и десен.



- Режим чистки
- Сильный режим
- Чувствительный режим
- Отбеливающий режим
- Режим изменения частоты

Спецификация продукта

Имя продукта	Электрическая зубная щетка
Модель	X5 PRO
Вход	5V/1A
Выход	3.7V/1.5W
Время зарядки	4 часа
Стандарт реализации	GB4706.1-2005 GB4706.59-2008

Примечание: пожалуйста, прочтите спецификацию и параметры внимательно и используйте их правильно.

Диагностика неисправностей

Проблема	Анализ	Решение
Вибрация уменьшилась	1. Зубная щетка давит на зубы. 2. Насадка слишком плотно прилегает к корпусу.	1. Аккуратно используйте щетку на зубах. 2. Снимите насадку и наденьте заново.
Быстро разряжается	1. Неправильно выбран режим зарядки и щетка не заряжается. 2. Недостаточно электричества.	1. Время зарядки недостаточное 2. Щетку не использовали 6 месяцев. 3. Батарея выходит из срока годности.
Зубная щетка перестала работать	1. Зубная щетка разрядилась. 2. Что-то не так с зубной щеткой.	1. Включите и убедитесь что индикатор работает. 2. Отремонтируйте.