### Гарантия

Большое спасибо за покупку нашего орального ирригатора! Пожалуйста, сохраните действительные купоны на продажу в качестве основы для гарантии:

- 1. Этот продукт согласно соответствующим положениям государства: Возможно бесплатно отремонтировать товар без ущерба от человеческого фактора в течение 1 года.
- 2. В течение гарантийного периода стоимость и сервисные сборы будут взиматься соответствующим образом:
- •Неправильное использование, обслуживание, повреждение при хранении потребителем;
- Отсутствие обязательств по ремонту после трех фактов ремонта;
   Отсутствие соответствующих ваучеров на продажу и более одного
- года повреждения с даты изготовления;
- Используется для коммерческого использования с целью причинения ущерба; Ущерб, вызванный форс-мажором (например, молния, землетрясение, пожар и т.д.)
- 3. Пожалуйста, внимательно заполните приведенную ниже форму: отправьте обратно в нашу компанию для обслуживания

#### Гарантийный талон

r aparitimisti rasion					
Имя клиента	Телефонный номер				
Модель продукта	Цвет продукта				
Дата покупки	Место покупки				
Дата гарантии					
Адрес доставки					

# Nicefeel ®


Ирригатор Руководство пользователя ON  Спасибо, что выбрали Nicefeel Oral Irrigator! Вы на пути к улучшению здоровья десен и здоровой улыбки! Сочетая давление воды и пульсацию, Nicefeel Oral Irrigator удаляет вредные бактерии глубоко между зубами и под линией десен, где чистка не будет достигнута.

#### Традиционная чистка

Традиционная чистка не может легко добраться до скрытых остатков пищи и вредных бактерий



Зубные нити имеют ограниченный доступ ниже десны

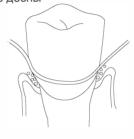

#### Nicefeel Оральный ирригатор

Удаляет захваченный пищевой мусор и вредные бактерии с помощью высокочастотной



#### Содержание

Защитные меры	3
Структура продукта ••••••	5
УФ-дезинфицирующее средство ••••••	7
Описание товара ***********************************	• 8
Профессиональные функции насадок ••••••	11
Чистка и уход •••••••	13
Общая неисправность и решения ••••••	

#### Аксессуары:

Основной блок (включая резервуар)  $\ \ \, x \ \ \, 1$  Руководство пользователя  $\ \ \, x \ \ \, 1$ 

#### Насадки

Обычная насадка высокого давления	Х	
Пародонтальная насадка	Х	
Ортодонтическая насадка	Х	
Насадка для очистки зубного налета	Х	
Насадка для очистки языка	Х	,

### • Защитные меры

При использовании электротехнической продукции, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### ОПАСНО - Для снижения риска поражения электрическим током:


- Продукт никогда не следует оставлять без присмотра при подключении.
   Всегда отключайте продукты от сети после использования. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Не кладите и не храните изделие там, где оно может упасть или попасть в душевую кабину или раковину.
- Не используйте во время купания. Никогда не используйте во время сна или сонливости.
- Не погружайте в воду или другую жидкость.
- Не тянитесь за продуктом, который упал в какую-либо жидкость,
- отключить немедленно.
- Проверьте шнур питания на наличие повреждений перед первым использованием и в течение срока службы изделия.
- Шнур питания не подлежит замене, этот прибор следует утилизировать, если шнур поврежден.
- Не используйте вложения, не рекомендованные нами. Используйте только насадки (включая стандартные насадки, насадки для ситки зубов и языка, чистящую насадку и ортодонтическую насадку), которые мы рекомендуем.
- Заполняйте резервуар только водой или другими рекомендуемыми растворами.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия или шланги.
- Держите электрический шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте там, где используются кислородные или аэрозольные баллончики.
- Только для использования внутри помещений.
- Это нормальное явление, если у вас при первом использовании орального ирригатора кровоточат десна.

# СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

# ВНИМАНИЕ: для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, серьезных травм:

- Не смотрите прямо на ультрафиолетовый свет.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку. Отключайте его от розетки, когда он не используется.
- Не используйте этот продукт, если у него поврежден шнур или вилка, и если он не работает должным образом. Например, если его уронили, повредили или уронили в какую-либо жидкость.
   Прекратите использование продукта немедленно!
- Внимательно проинструктировать и контролировать детей и лиц с особыми потребностями в правильном использовании этого продукта. Не позволяйте использовать в качестве игрушки.
- Не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие деликатные области. Этот продукт способен создавать давление, которое может привести к серьезным повреждениям в этих областях.
- Давление, создаваемое этим продуктом, может привести к серьезному повреждению этих частей.
- Прочитайте «Инструкция по эксплуатации» для правильного использования.
- Используйте только как описано в этом руководстве. Используйте только наши рекомендуемые вложения.
- Не используйте ирригатор при ношении каких-либо устных украшений, снимите их перед использованием.
- Не используйте, если у вас есть открытая рана на вашем языке или во рту.
- Если ваш врач или кардиолог посоветовал вам получить премедикацию антибиотиками перед стоматологическими процедурами, вам следует проконсультироваться со своим стоматологом перед использованием этого инструмента или любой другой гигиены полости рта.
- Не тяните и не переносите шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не закрывайте дверцу шнура и не тяните шнур за острые края или углы. Не ставьте / не запускайте прибор через шнур.
- Держите шнур подальше от нагретой поверхности.
- Не отключайте, потянув за шнур. Чтобы отключить, держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не беритесь за вилку или прибор мокрыми руками.
- Выключите изделие перед отключением от сети.


### Структура продукта

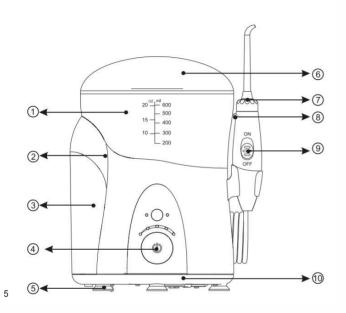

- 1. Резервуар
- 6. Крышка резервуара
- 2. УФ-дезинфекция
- 7. Вращающаяся на 360 ° насадка
- 3. 7 шт насадок
- 8. Кнопка для снятия насадок

4. Выкл/Вкл

- 9. Кнопка паузы
- 5. Ножки-присоски
- 10. Базовые присоски

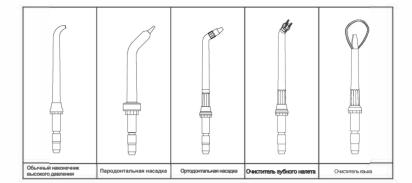

• Обычный наконечник высокого давления: 3-х цветное кольцо. Для гигиенических целей. Рекомендуется для использования 3 людьми соответственно (семейный пакет).

Другие 4 специальные насадки:

• Пародонтальная насадка х 1

• Ортодонтальная насадка х 1

• Очиститель зубного налета х 1

• Очиститель языка х 1

Смотрите дополнительные инструкции на стр. 11-12.

#### УФ-дезинфицирующее средство:

- С помощью УФ-дезинфицирующего средства вы можете чистить насадки после каждого использования.
- Этот продукт принимает интеллектуальное управление дезинфекцией.
- Коробка энергосберегающих светодиодных ламп конструктивных характеристик.
- Авторитетное тестирование.
- Доказано, что способен убить 99,9% бактерий и вирусов.
- Убивает микробов.
- Вы можете включить дезинфицирующее средство только в том случае, если дверь правильно закрыта.
- УФ-излучатель останавливается, если вы откроете дверь во время цикла дезинфекции.
- Цикл УФ длится 15 минут, а затем автоматически отключается, а микропереключатель скрыт внутри, чтобы избежать ошибочного прикосновения.
- Прекратите использование УФ, если ультрафиолетовая лампа остается включенной, когда ящик для принадлежностей удален или отсутствует в ирригаторе. Ультрафиолетовый свет может быть вредным для глаз и кожи человека.




Этот прибор должен всегда находиться в недоступном для детей месте.

#### Инструкция по эксплуатации:

Подключите к розетке. Если розетка управляется настенным выключателем, убедитесь, что выключатель включен.

#### Подготовка резервуара

Снимите крышку и резервуар с основания, наполните резервуар теплой водой, установите резервуар обратно на основание, плотно прижмите и наденьте крышку.

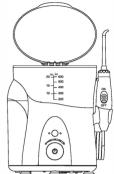

#### Установка и снятие насадок


Вставьте насадку в центр ручки в верхней части рукоятки стоматологической форсунки. Цветное кольцо будет на одном уровне с концом ручки, если наконечник правильно зафиксирован на месте. Чтобы снять наконечник с ручки, нажмите кнопку выброса насадки и вытяните наконечник из ручки.



#### Регулировка настроек давления


Поверните ручку регулировки давления на основании устройства в самое низкое положение для первого использования.


Постепенно увеличивайте давление с течением времени в соответствии с настройками, которые вы предпочитаете, или в соответствии с указаниями вашего стоматолога.

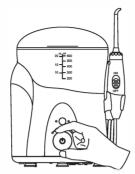

#### Использование орального ирригатора

Наклонитесь над раковиной и положите наконечник в рот. Направьте наконечник на зубы. Свободной рукой нажмите кнопку включения / выключения. Установите давление на желаемое значение. Направьте поток, поворачивая ручку в верхней части ручки.

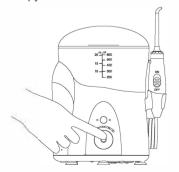

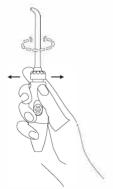

#### Рекомендуемая техника

Направьте поток под углом 90 градусов к линии десны, слегка закройте губы, чтобы избежать разбрызгивания, но позвольте воде свободно течь изо рта в раковину. Для достижения наилучших результатов начните с молярной области (задних зубов), смещаясь к передним зубам. Проведите струйным наконечником по линии десны и сделайте короткую паузу между зубами. Продолжайте процесс, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены.





#### Пауза

Вы можете временно остановить поток в любое время, сдвинув вниз кнопку на ручке.

#### Когда закончили

Выключите устройство, оставшаяся жидкость осталась в резервуаре. Отключите устройство.



#### Пародонтальная насадка

Пародонтальная насадка может направлять воду или жидкие пероральные лекарства в определенные места под слизистой оболочкой десны.

#### Обычный насадка высокого давления

Очищает глубокие участки в полости рта с диапазоном 360 градусов, дополнительно покрывая места, которые трудно чистить, пищевые отходы и вредные бактерии, расположенные глубоко в зубных трещинах или под десной. Это дает вам приятные стоматологические впечатления.




#### Наконечник для чистки языка

Поместите языковой скребок на язык перед включением орального ирригатора. Слегка поместите скребок для языка в центральную заднюю часть языка, слегка потянув его вперед, удерживая при этом в контакте с поверхностью языка.



#### Насадка для чистки зубного налета


Зубной налет представляет собой группу бактерий, которые прилипают к поверхности зубов, но еще не минерализовались. Струйный наконечник очень эффективен для предотвращения зубного налета. Насадка для очистки зубного налета специального назначения предназначена для очистки областей, которые трудно достать в брекетах и других зубных устройствах.

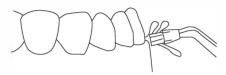

#### Ортодонтическая насадка

Специальная ортодонтическая насадка уникально разработана для одновременной чистки и полоскания труднодоступных мест вокруг брекетов и других стоматологических работ.

Чтобы использовать ортодонтическую насадку, наклонитесь низко над раковиной и используйте щетинную щетку для чистки вокруг зубоврачебной работы. Вода будет течь через щетку, чтобы смыть любой мусор.

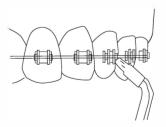

#### Чистка

После использования какого-либо специального раствора в резервуаре, промывайте агрегат после каждого использования.

Частично заполните резервуар теплой водопроводной водой, направьте наконечник в раковину, включите устройство и дайте ему поработать, пока резервуар не опустеет. Это поможет предотвратить засорение наконечника и продлить срок службы вашего устройства. При необходимости очищайте изделие мягкой тканью и мягким неабразивным моющим средством.

Перед чисткой, пожалуйста, отключите устройство от электрической розетки.

Перед тем, как подвергнуть стоматологическую струю воздействию низких температур, снимите резервуар и дайте устройству работать до полного опустошения.

#### Сервисное обслуживание

- После использования орального ирригатора Nicefeel обязательно отсоедините шнур питания и бак вверх ногами на плоской поверхности, когда вода полностью высохнет, поместите ее в сухое прохладное место вместе с очищенным и сухим хозяином, он должен помещать в коробку или аналогичное хранилище, если оно не используется в течение длительного времени.
- 2. В случае неисправности машины вы можете обратиться к продавцу, чтобы узнать методы технического обслуживания.
- Не разбирайте и не пытайтесь устранить неисправность этого продукта, что может привести к возникновению проблем, не входящих в гарантию компании.
- 4. Если шнур питания поврежден, обратитесь в наш сервисный центр или в сервисный центр для технического обслуживания. Не заменяйте шнур питания и не подключайте самостоятельно.

5. Если продукт не имеет гарантийного срока, мы также предоставляем услуги по ремонту, соответственно возьмем на себя стоимость материалов и небольшую стоимость рабочей силы.

#### Общие проблемы и решения

Проблема	Причина	Решние
Утечки между наконечником и верхней частью ручки	Наконечник не полностью установлен	Снимите насадку и установите заново
Пародонтальная насадка не устанавливается	Насадка спомана	Замените насадку на новую
Шланг между ручкой и базой протекает	Повреждение шланга	Может быть заменен продавцом на ремонтный комплект самообслуживания
Протекает резервуар	Отсутствует клапан резервуара для воды или клапан резервуара для воды перевернут	Заменить резервуарный клапан (связаться с продавцом); Поверните клапан правой стороной вверх
Неадекватное давление	Резервуар неправильно расположен	Убедитесь, что розетка работает, "проверить с другим прибором (проверить кнопку электрического оброса и / или настенный выключатель)
Отсутствует подача воды	Мотор не работает	Заполнить резервуар

Мы гарантируем первоначальному покупателю / владельцу этого нового продукта, в отсутствии дефектов материалов и изготовления в течение 1 года с даты покупки.

Еще раз спасибо за выбор орального ирригатора Nicefeel!