


ReFa

ReFa LED MASK

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА:
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Номер модели: RE-BE

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ МАСКИ

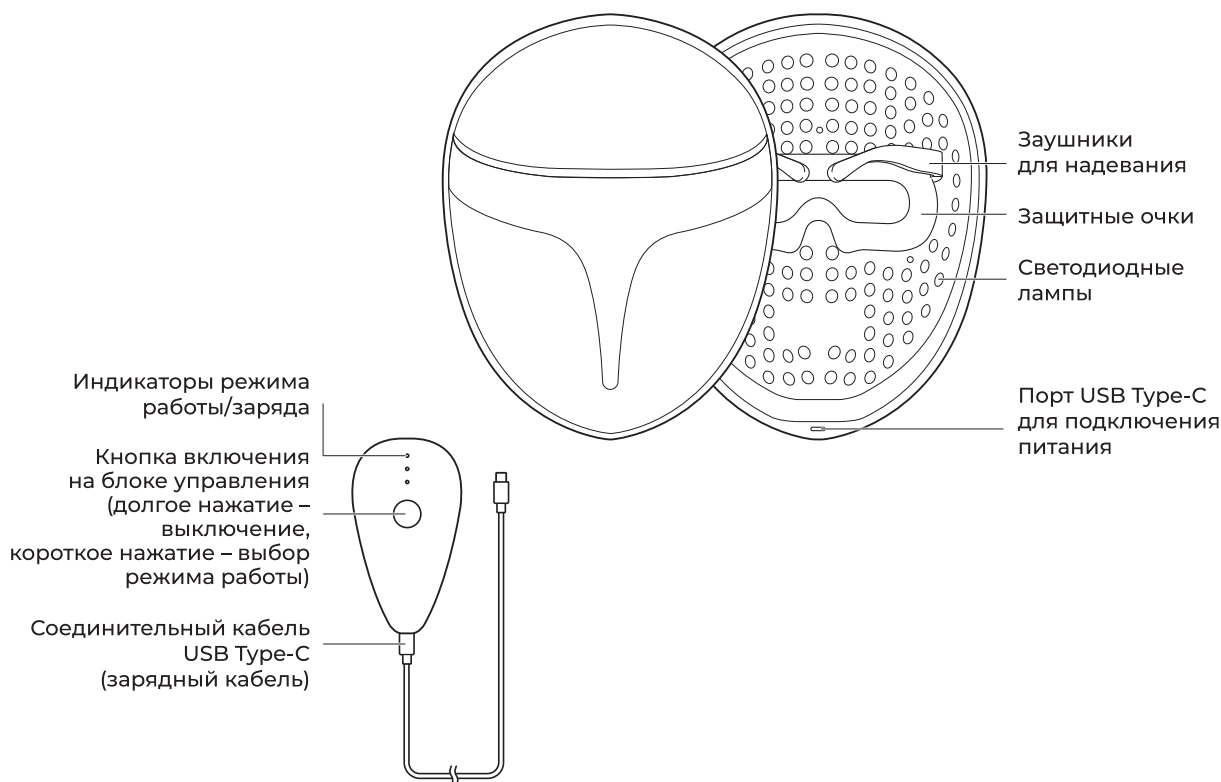

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Соедините части устройства, вставив концы соединительного кабеля в порты на блоке управления и маске.
- Нажмите кнопку включения и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Во включенном состоянии короткое нажатие кнопки позволяет переключаться между тремя режимами работы.
- В каждом режиме работы предусмотрено автоматическое выключение после 10 минут использования. При необходимости закончить использование раньше нажмите кнопку выключения и удерживайте в течение 2 секунд.

Перед использованием обязательно внимательно ознакомьтесь с разделами «Техника безопасности» и «Обратите внимание» в руководстве пользователя.

ПРОЦЕДУРА УХОДА

Шаг 1: Снимите макияж


Перед проведением фототерапии удалите с лица макияж и умойтесь, затем нанесите тоник или крем для увлажнения.

**Перед проведением фототерапии не рекомендуется использовать средства, вызывающие раздражение или фоточувствительность.*




Шаг 2: Соедините маску и блок управления

Соедините части устройства, вставив концы соединительного кабеля в порты на блоке управления и маске. Убедитесь, что соединение прошло успешно

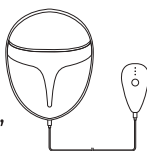

Шаг 3: Наденьте маску и выберите режим ухода

Выберите подходящий режим работы, основываясь на состоянии кожи и ожиданиях от ухода.

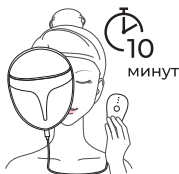

Шаг 4: Позаботьтесь о коже

После проведения фототерапии рекомендуется воспользоваться тканевой маской для увлажнения, а затем нанести на лицо увлажняющее средство или крем.



Шаг 5: Позаботьтесь об устройстве


Когда устройство не используется, его можно хранить в упаковочной коробке. При наличии загрязнений протрите их слегка смоченным куском мягкой ткани или влажной гигиенической салфеткой.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ


Напоминание:

Продолжительность работы каждого из режимов составляет 10 минут. Разные режимы можно совмещать. Общая продолжительность использования не должна превышать 30 минут в сутки.

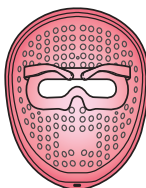


Режим «Лифтинг» (красный)

Ежедневный лифтинг, разглаживание морщин и активизация выработки коллагена

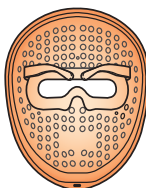

Режим «Восстановление» (оранжевый)

Уменьшение чувствительности кожи и покраснений. Помогает коже адаптироваться к сезонным изменениям.

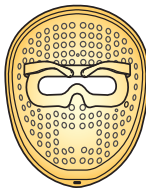

Режим «Сияние» (желтый)

Осветление и маскировка следов недостатка сна, создание ровного тона кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- ▶ Перед первым использованием проведите проверку на фоточувствительность на коже руки.
- ▶ После проведения фототерапии рекомендуется воспользоваться маской или кремом для увлажнения.
- ▶ При использовании в дневное время избегайте воздействия солнца, чтобы предотвратить возникновение пигментации.
- ▶ При возникновении проблем соблюдайте рекомендации специалиста.

ВНИМАНИЕ

При зарядке блока управления используйте входящий в комплект соединительный кабель USB Type-C (зарядный кабель) и подходящий адаптер переменного тока. В противном случае существует риск поломки или возгорания.

В устройстве используется внутренний перезаряжаемый аккумулятор. Перед первым использованием зарядите устройство.

При долгом перерыве в использовании устройства может возникнуть ситуация, когда оставшегося заряда недостаточно

но для его работы. В этом случае зарядите аккумулятор и попробуйте заново.

Заряжайте устройство при температуре воздуха 10-30 °C. В зависимости от характеристик внутреннего аккумулятора существует вероятность снижения эффективности его работы при слишком низкой или слишком высокой температуре окружающей среды.

Во время зарядки использование устройства невозможно.