


FENDERMATE®

Самые быстрые в мире матрицы!

Их установка занимает менее 5 секунд...




FENDERMATE® Матрицы FenderMate

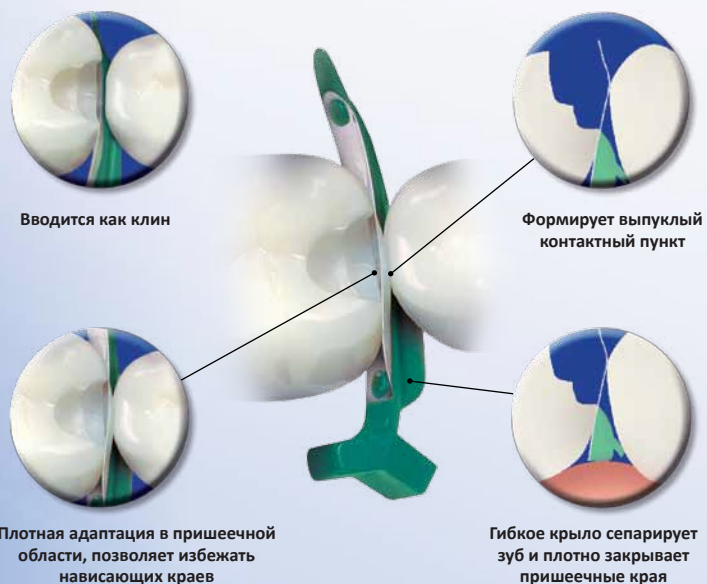

Работайте быстрее и проще с FenderMate

Патент заявлен

FENDERWEDGE® FenderWedge Защищает и сепарирует

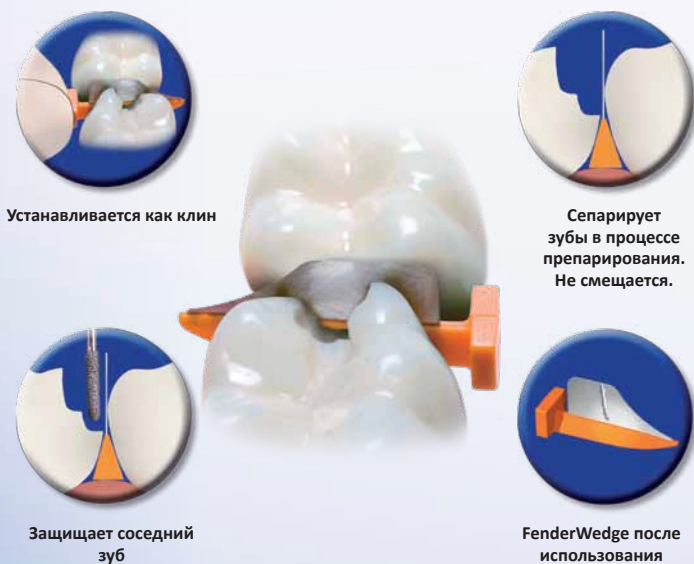

Работайте быстрее и безопаснее с FenderWedge

Патент заявлен

Пришеечные нависающие края – Легко избежать

Матрица, которая неплотно прилегает к краям полости под контактным пунктом, может вызвать формирование нависающих краев пломбы, которые не всегда выявляются при контрольном осмотре пломбы с помощью зонда или флосса. С течением времени под действием окклюзионной нагрузки происходит скол нависающей части пломбы, что создает условия для скопления пищи и зубного налета. Системы секционных матриц, состоящие из матрицы, клина и кольца, могут создавать риск вытекания материала из-за недостаточно плотного прилегания матрицы вследствие небольшого давления, оказываемого клином на матрицу при фиксации ретенционного кольца для сепарации зубов.



Матрицы с неплотным прилеганием в пришеечной области.



Избыток пломбировочного материала.



Скол нависающих краев пломбы.

Как проводить прямую реставрацию по II Классу

FenderWedge® – «Защита рядом стоящего зуба – это этическая необходимость...»



Установите защитный клин FenderWedge как обычный межзубный клин.



FenderWedge защищает соседний зуб во время препарирования. Работайте быстрее благодаря защитной стальной пластинке!



FenderWedge остается на своем месте в процессе препарирования и обеспечивает сепарацию зубов, чтобы компенсировать толщину матрицы.

FenderMate®



FenderMate благодаря оптимальной кривизне матрицы может быть установлена менее чем за 5 секунд.



Позволяет формировать реставрации с плотным контактным пунктом и хорошими пришеечными краями.



Реставрация закончена

все, что Вам нужно для получения
первоклассных реставраций
по II Классу.....

FENDERMATE®
FENDERWEDGE®

FenderWedge выпускается четырех разных размеров и цветовой кодировкой для простоты идентификации.

Большой



Средний



Маленький



Очень маленький



Пищевой пластик (полипропилен) и красители. Нержавеющая сталь.

FENDERWEDGE®
**THE DENTAL
ADVISOR**
++++

FenderMate выпускается двух разных размеров с цветовой кодировкой для простоты идентификации.

Обычная левая



узкая левая



обычная правая



узкая правая



Пищевой пластик (полипропилен) и красители. Нержавеющая сталь.

FenderWedge и FenderMate являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании Directa AB. Авторские права Directa AB 2009

Copyright Directa AB 2009

DIRECTA AB P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden

Tel: +46 8 506 505 75, Fax: +46 8 590 306 30, info@directadental.com, www.directadental.com

Закрытое Акционерное Общество «СС ВАЙТ»

Телефон: (495) 730-51-23, 952-23-51, 952-57-04, 952-01-47, 952-15-84

Факс: (495) 952-04-80.

E-mail: info@stomprod.ru

www.stomprod.ru